

査察にも対応可能なサンプルマネジメントツール ～ NASTER System に標準でアドオン～

1 独自の開発ポリシー

医薬品安定性試験に長く携わってきた経験と
多くの医薬品メーカーのご要望を基に開発されたシステムです。



2 検体管理機能



① 初期設定

・画面の項目名称や帳票のタイトルを自由に設定することができます

② 試験計画登録

・計画名称やサンプリングスケジュールなど、試験に必要な情報を設定することができます

③ 試験開始

④ サンプリング

・サンプリングの実施記録を登録することができます
・サンプル未処理一覧を表示させることができます


⑤ 試験終了

・査察でサンプルマネジメントについて確認される機会が増えている昨今、
管理体制強化にお役立てください。

3 メール機能

サンプリング予定、取り出し予定量などのメール配信により、
サンプリング忘れを防止します。

件名: (サンプリング予定日、
試験計画番号、試験計画名称、
ロット番号、試験番号)

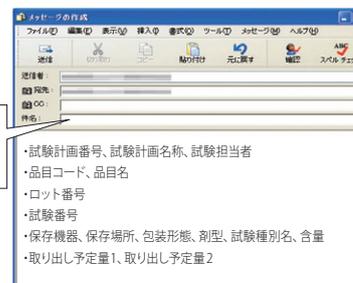

4 バーコード機能(オプション設定)

バーコード機能を活用することで、サンプルの取り間違い、
サンプリングの実績入力ミスを防止します。



5 温湿度データの管理機能

NASTER System との連携により
温湿度データ(グラフ、集計)、逸脱データ(警報データ)を
確認することができます。

